


ЧАС ПЕРЕВІРКИ РЕЗУЛЬТАТІВ

Реакція на гістамін (позитивний контроль) має максимальний розмір через 10 хвилин від моменту постановки, тоді як реакція на алерген досягає свого максимуму на рівні близько 15 хвилин. Якщо тест залишається довше, ніж 20 хвилин реакція може зменшуватися або бути втраченою, і, якщо вона не вимірюється своєчасно, може знадобитися повторити тест

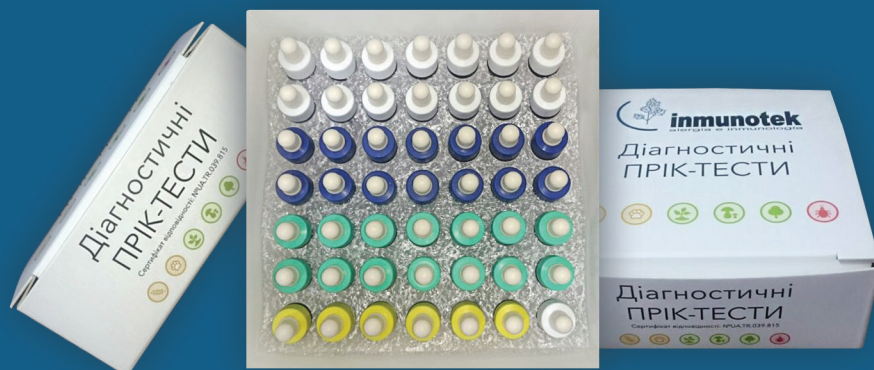

ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ ПУХИРЯ І ЗОНИ ГІПЕРЕМІЇ

Надлишок рідини, після нанесення крапель на шкіру, через 1 хв. треба видалити, за допомогою серветки або марлі, робиться це дуже обережно, щоб не змішати різні алергени і не зіпсувати проведення тесту. Стандартний і загальноприйнятий метод для кількісного визначення прик-тесту полягає у вимірюванні середнього діаметра пухиря у мм, використовуючи лінійку (прозора лінійка часто є найбільш зручною). Вимірюється найбільший діаметр (мм) пухиря, іноді, якщо пухирі неправильної форми, повинно вимірювати найдовший і найкоротший діаметри, перпендикулярно осі пухиря і отримані дані скласти і поділити на 2 (середнє значення діаметра). Відмічається також наявність навколишньої еритеми (flare - F) або присутність додаткових пухирів, які мають назву псевдоподій (pseudopod-P). Наявність псевдоподій ознака значної сенсibilізації. Оцінка результатів тестування проводиться виключно лікарем, він же інтерпретує отримані результати

ШКІРНІ ПРИК-ТЕСТИ



СТАНДАРТИЗОВАНІ ЕКСТРАКТИ - ДОСТОВІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Стандартизовані за вмістом мажорних компонентів алергенів
- 1 флакон - 50 та більше постанов
- **Високий профіль безпеки**



Зареєстровано в Україні. Сертифікат відповідності № UA.TR.039.815

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АЛЕРГЕНІВ

КОД	Controls and other allergenic extracts/ Контроль та інші екстракти алергенів
K100	Negative control (Негативний контроль)
K200	Histamine (Позитивний контроль)
	Grass pollens/ Пилок трав, злаки
G102	Bermuda grass (Бермудська трава)
G110	Timothy grass (Тимофіївка)
G201	Hordeum vulgare (Ячмінь звичайний)
G202	Avena sativa (Овес посівний)
G205	Rye (Жито)
	Pollens of Weeds, Flowers and Bushes/ Пилок чагарників, бур'янів, квітів
W301	Cornmon ragweed (Амброзія полинолиста)
W302	Mugwort (Полин звичайна)
W314	Plantago lanceolata (Подорожник ланцетолистний)
	Tree pollens/ Пилок дерев
T502	Silver birch (Берега повисла)
T507	Alder (Вільха)
T508	Fraxinus excelsion (Ясен)
T518	White poplar (Тополя Біла)
T526	Pinus sp (Сосна)
T556	Platanus sp (Платан кленолистний)
	Mites/ Кліщі домашнього пилу
M601	D.pteronyssinus (Кліщ домашнього пилу)
M602	D.farinae (Кліщ домашнього пилу)
M603	Lepidoglyphus destructor (Домашній пиловий кліщ)

Прик-тести («prick-test», «тест уколом») - це доступний, швидкий, безпечний, мінімально інвазійний, чутливий та специфічний метод виявлення сенсibilізації у хворих з atopічними захворюваннями для діагностики IgE-залежних реакцій (I типу імунних реакцій) А, який має високий ступінь кореляції з клінічними проявами

Дерева



Злаки



Бур'яни



Кліщ домашнього пилу



Епітелій тварин



Плісняві гриби



Продукти харчування



Позитивний/негативний контроль



	Molds/ Плісняві гриби
P901	Alternaria alternata (Плісняві гриби)
P902	Aspergillus fumigatus (Плісняві гриби)
P904	Candida albicans (Дріжджовий грибок)
P905	Cladosporium herbarum (Плісняві гриби)
P908	Penicilium notatum (Плісняві гриби)
P910	Botrytis cinerea (Плісняві гриби)
	Foods/ Продукти харчування
	MILK & DERIVATIVES/ МОЛОКО ТА ЙОГО СКЛАДОВІ
F002	Fresh cow milk (Молоко)
F077	Beta-lactoglobuline (Бета-лактоглобулін)
F078	Casein (Казеїн)
F076	Alpha-lactoalbumin (Альфа-лактоальбумін)
	EGG & FRACTIONS/ ЯЙЦЕ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ
F245	Whole egg (Яйце)
F001	Egg white (Білок яйця)
F075	Egg yolk (Жовток яйця)
	FLOURS/ Борошно та насіння
B403	Helianthus annuus (Соняшник)
F004	Wheat flour (Пшеничне борошно)
F005	Rye flour (Житнє борошно)
F006	Barley flour (Ячмінне борошно)
	Epithelia, feathers and insects/ Епідерміс та лупа тварин
E801	Cat dander (Кіт)
E802	Dog dander (Собака Епітелій)
L001	Latex (Латекс)

Результати шкірного прик-тесту напряду залежать від якості алергенних екстрактів, які використовуються



У пацієнтів з наявністю ризику розвитку системних анафілактичних реакцій протипоказано проведення шкірного прик-тесту на тлі прийому бета-блокаторів та інгібіторів АПФ. Це пов'язано з інтерференцією бета-блокаторів відносно адреналінових рецепторів